

braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADATM
healthcare



< timeto relax



SKYLINER II



CASADATM
healthcare

since
2000

< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Sessels nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Skyliner II.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Kontraindikationen	5
Warnhinweise zur Anwendung.....	6
Ausstattung Funktionen	7
Aufbau und Montage	8
Reinigung Pflege Lagerung.....	15
Störungssuche	16
Technische Daten	16
EU-Konformitätserklärung	17
Gewährleistungsbestimmungen	17

Sicherheitshinweise



Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel verfügt über beheizte Bereiche. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren sollten vor der Benutzung vorsichtig sein. (ICE 60335-2-32)
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromversorgung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckenfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Reinigung und Wartung darf von Kindern unter 14 Jahren nicht ohne Aufsicht ausgeführt werden.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenem Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder unter 14 Jahren, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht, direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.
- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass sich darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder unter 14 Jahren.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes Kabel zum Austausch erworben werden.

Kontraindikationen

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt: Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Bettlägerige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessel von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
- Kinder unter 14 Jahren sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass sie den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.

KONTRAINDIKATIONEN „BRAINTRONICS“


- Psychosen (z.B. Schizophrenie, Bipolare Störung, Endogene Depressionen)
- Persönlichkeitsstörungen
- Epilepsie und ähnliche Anfallserkrankungen
- Herzerkrankungen
- Erkrankungen des zentralen Nervensystems
- Thrombose
- Endogene Depressionen
- ADS (unteraktive)
- Kürzlich vorgefallener Herzinfarkt oder Schlaganfall
- Geistige Behinderung
- Suchterkrankung wie Drogen, Alkohol und Medikamentenabhängigkeit
- Regelmäßige Einnahme von Psychopharmaka
- Schwangerschaft

HINWEIS: Aus ethischen und rechtlichen Gründen sollte braintronics nicht bei Kindern und Jugendlichen ohne ausdrückliche Genehmigung des gesetzlichen Vertreters angewandt werden. Personen die durch Meditation in Glaubenskonflikte kommen könnten, sollten von der Anwendung absehen.

Warnhinweise zur Anwendung


HINWEIS

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um Schäden am Massagesessel zu vermeiden, üben Sie bitte kein Druck auf die ausgefahrene Fußstütze aus.

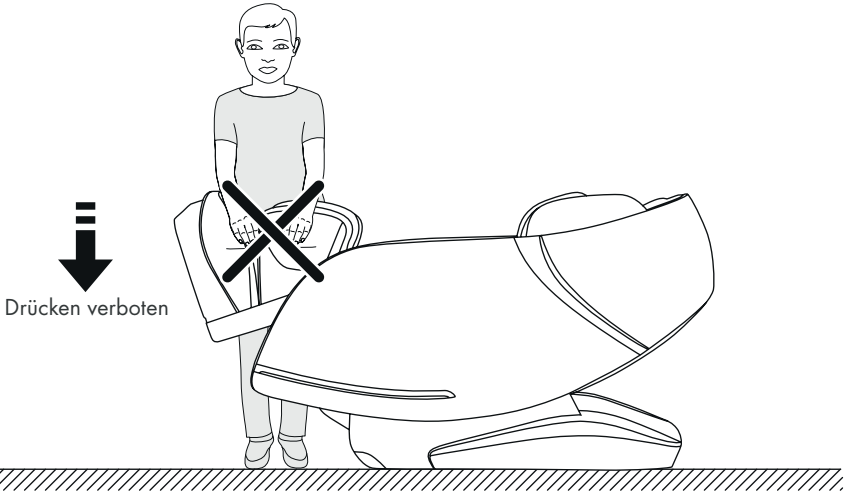



HINWEIS

Achten Sie vor jeder Massage darauf, dass die Massagerollen nicht im Sitzbereich stehen geblieben sind.

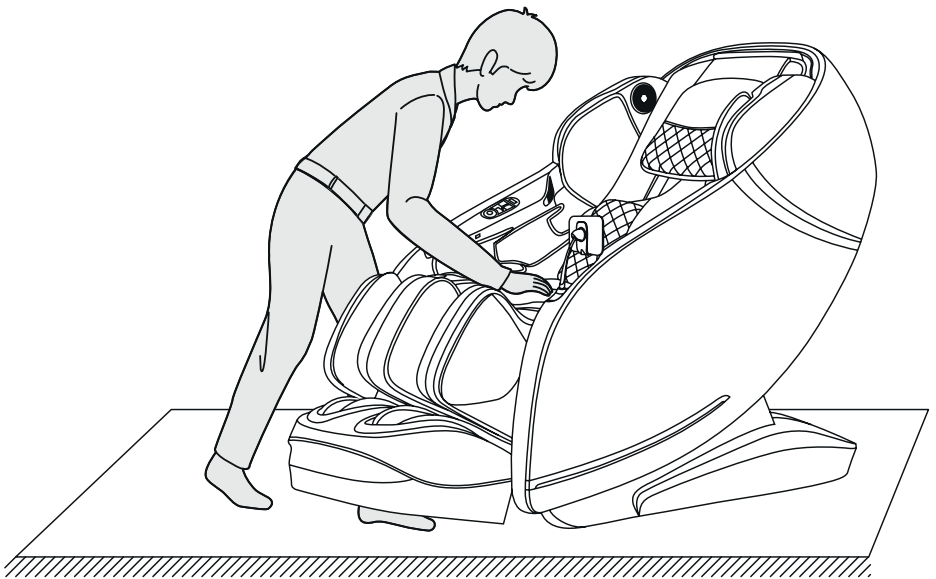


Ausstattung | Funktionen

1. Kopfkissen
2. Lautsprecher
3. Schulterairbag
4. Rückenkissen
5. Lendenairbag
6. Ionen-Luftzufuhr
7. Schnellstart Tasten
8. USB-Ladeanschluss
9. Arm Airbag
10. Ablagefach
11. Sitzkissen
12. Wadenmassage
13. Armlehne
14. LED-Beleuchtung
15. Fußmassage

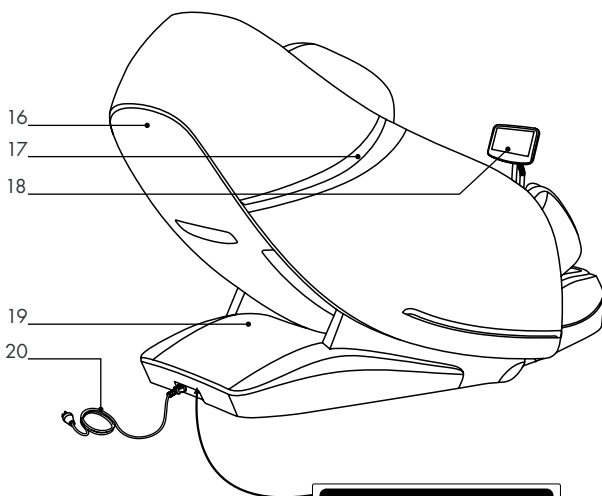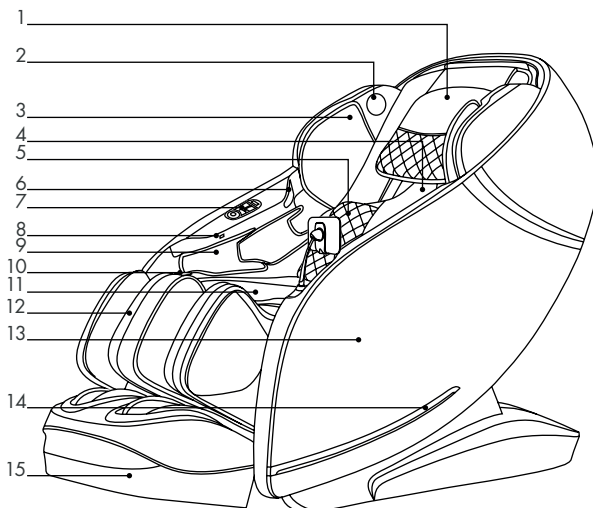

16. Rückwand
17. Seitenverkleidung Dekor
18. Fernbedienung
19. Schutzabdeckung
20. Netzkabel
21. Netzkabelanschluss
22. Netzschalter

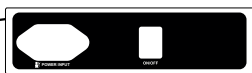

21

22

Aufbau und Montage

1. Montage der Armlehnen

- Zunächst nehmen Sie bitte die Verbindungsstecker und den Luftschlauch, aus der Armlehne passend zu denen die sich am Gestell des Massagesessels befinden heraus (Abb. 1).
- Verbinden Sie nun jeden Anschluss mit dem dazugehörigen Gegenstück (farbig markiert). (Abb. 2).

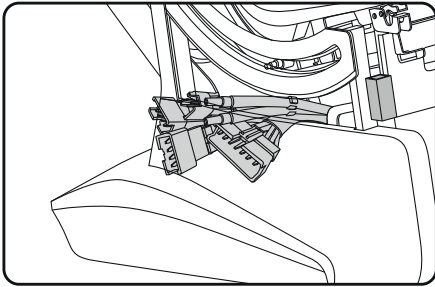


Abb. 1

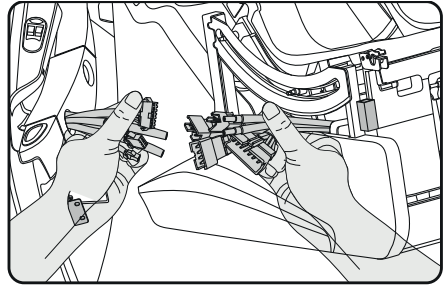


Abb. 2

- Die Verbindungsteile auf der Unterseite des Gestells werden fest in die Armlehnenverbindung gesteckt. Der Luftschlauch ist ebenfalls in die korrekte Position zu bringen. (Abb. 3).
- Nach dem Anschließen mit den entsprechenden Anschlussleitungen in den unteren Teil des Rahmens einführen und darauf achten, dass der Luftschlauch intakt ist. (Abb. 4).

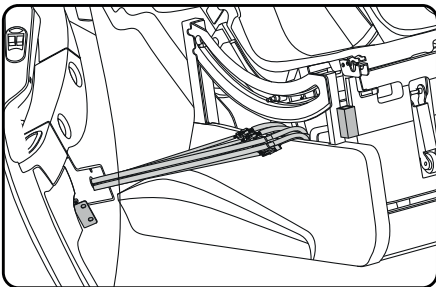


Abb. 3

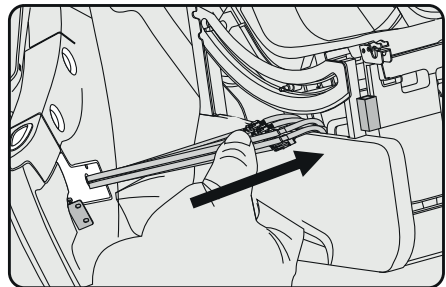


Abb. 4

- Hängen Sie nun den Bolzen am hinteren Seitenteil (innere Seite) in die Führung am Sessel. (Abb. 5)
- Arretieren Sie die vordere Befestigung am Sitzteil und hängen diese mit leichtem Druck ein. (Abb. 6)

Aufbau und Montage

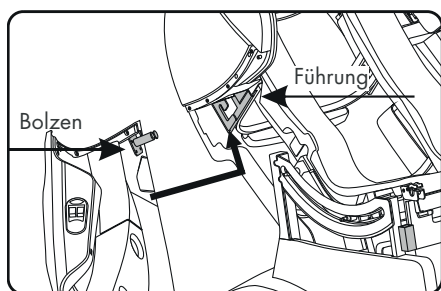


Abb. 5

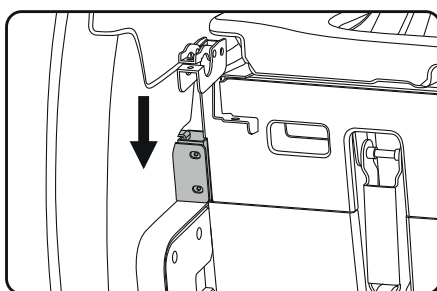


Abb. 6

- Befestigen Sie die vordere Halterung mit 2x (M5X10) Schrauben. (Abb.7).
- Befestigen Sie die hintere Seite des Seitenteils mit 5x (M4x10) Schrauben. (Abb.8).

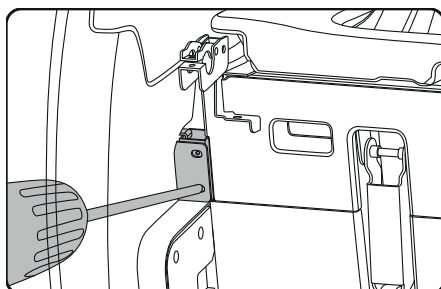


Abb. 7

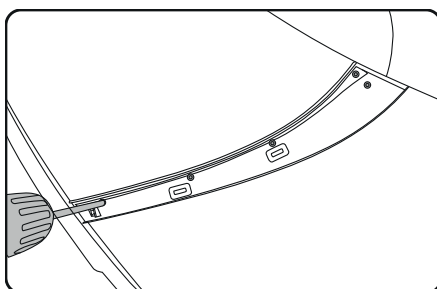


Abb. 8

- Haken Sie die Blenden zuerst mit der schmalen Seite in das Seitenteil und clippen danach die Blende an das Seitenteil (Abb. 9).
- Befestigen Sie die Blende mit einer Schraube ST4,2x16 von der inneren Seite am Schulterteil. Bei der Montage sind die Montageschritte der beiden Seitenteile identisch. (Abb. 10)

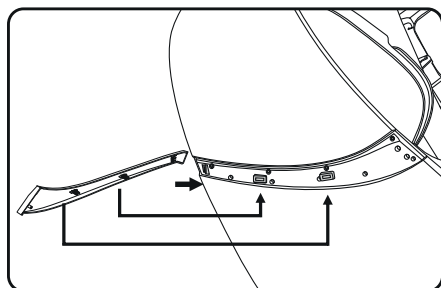


Abb. 9

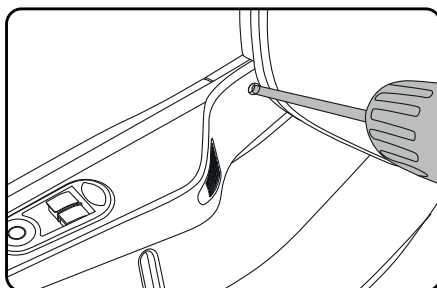


Abb. 10

Aufbau und Montage

2. Montage Fußteil

- Positionieren Sie das Fußteil vor das Sitzteil und verbinden Sie Luftschlauch und Stecker mit dem Gegenstück am Sitzteil (Abb.1 + 2).
- Danach schieben Sie den Überstand des Luftschlauchs und des Kabels zurück in das Sitzteil.

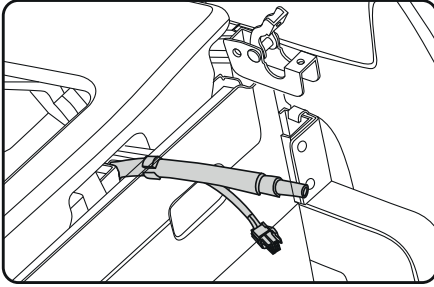


Abb. 1

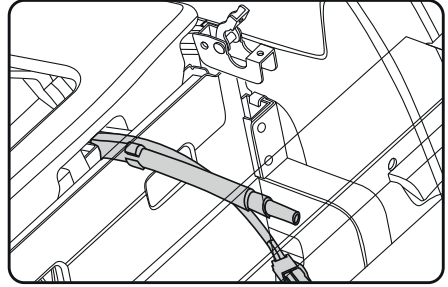


Abb. 2

- Schieben Sie die innere sowie äußere Hülse auf die Halterung am Fußteil. Achten Sie darauf, dass die Kopfseite zum Fußteil zeigt (Abb. 3).
- Öffnen Sie die Scharniere rechts und links an der inneren Seite des Sitzteils (Abb. 4).

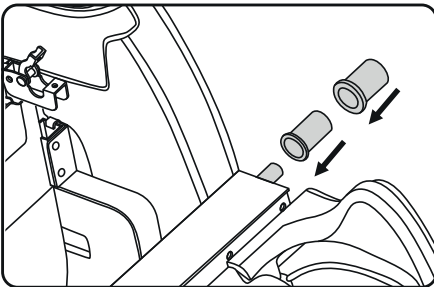


Abb. 3

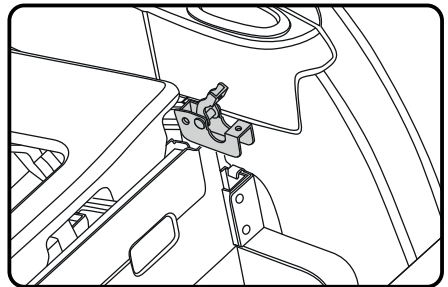


Abb. 4

- Hängen Sie das Fußteil mit den Hülsen in die Scharniere (Abb. 5).
- Schließen Sie die Scharniere und sichern Sie dies mit einer M5 Schraube (Abb. 6).

Aufbau und Montage

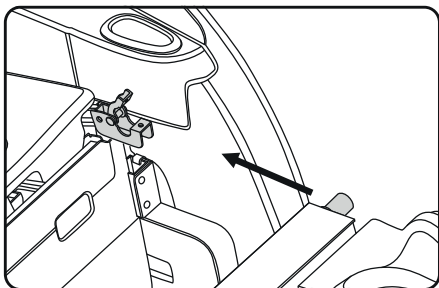


Abb. 5

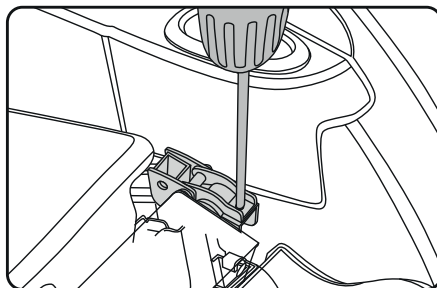


Abb. 6

- Decken Sie abschließend die Scharniere mit der Plastikklappe ab (Abb. 7).

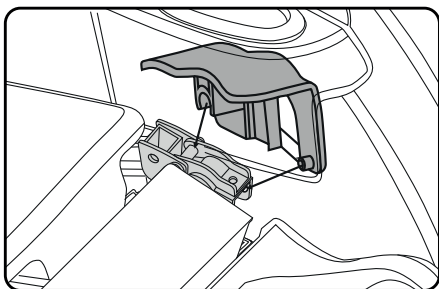


Abb. 7

3. Montage Touchscreen Halterung

- Stecken sie die Halterung in das Seitenteil und befestigen Sie diese mit 3x M4 Schrauben (Abb.1+2).

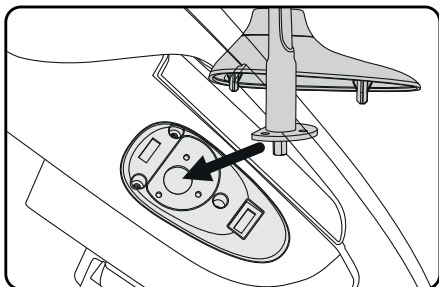


Abb. 1

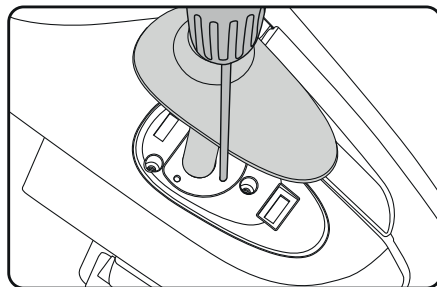


Abb. 2

Aufbau und Montage

- Klicken Sie den Plastikfuß der Halterung auf die Montagefläche am Massagesessel (Abb. 3+4)

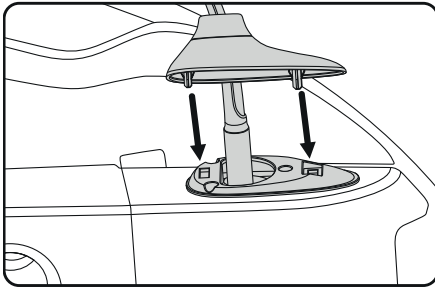


Abb. 3


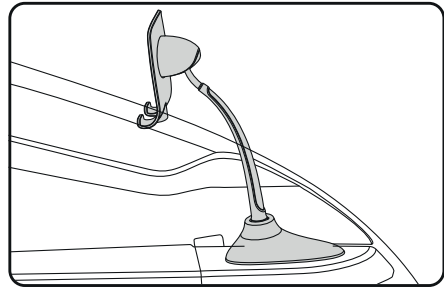


Abb. 4

HINWEIS: Der Anschluss für die Fernbedienung befindet sich an der Innenseite zur Halterung unter dem Sitzkissen. Stecken Sie das Kabel ein und sichern Sie dieses mit dem Gewindering.

4. Kissen- und Rückenpolster Handhabung


- Durch die Verwendung des Kissens kann die Intensität der Knetmassage an Nacken und Schulter reduziert werden. Wir empfehlen die Verwendung der Polster.
- Rückenpolster und Rückenlehne sind durch Reißverschluss (1), und das Kissen mit dem Rückenpolster mit einem Klettverschluss (2) verbunden.

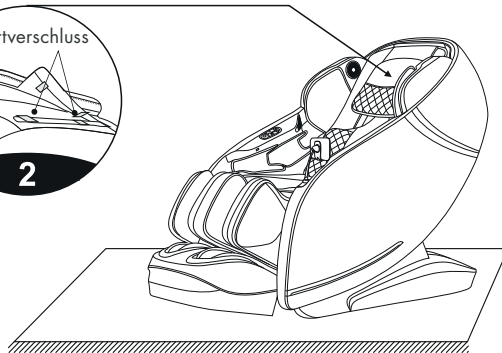

Aufbau und Montage

5. Bodenschutzmaßnahmen




- Um Beschädigungen am Fußboden zu vermeiden, stellen Sie den Massagesessel auf einen Teppich oder eine andere stabile Unterlage.

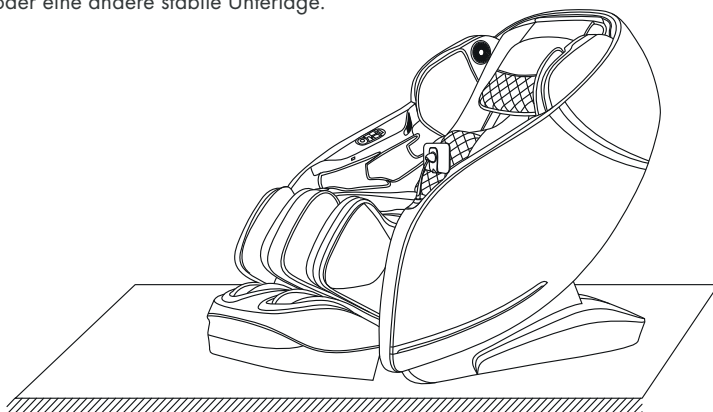

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie den Sessel nicht auf Holzfußboden, unebenem Boden oder auf engem Raum verschieben.

6. Ausschalten, Massage beenden


- Durch Drücken des Netzschalters (1) während der Massage werden alle Massagefunktionen sofort ausgeschaltet.
- Abschalten der Energieversorgung des gesamten Massagesessels. (2) (3)

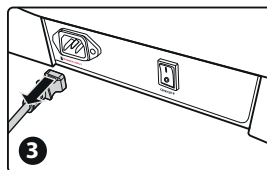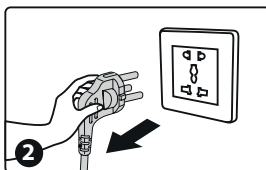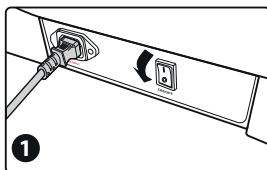

Aufbau und Montage

7. Massagesessel umstellen

- Achten Sie darauf, dass keine Kabel auf dem Boden liegen. Neigen Sie die Rückenlehne bis zu einem gewissen Grad nach hinten (wobei der Schwerpunkt auf den Rädern liegt), schieben Sie den Stuhl mit den Händen nach vorne oder hinten und setzen Sie ihn schließlich langsam und sanft in die Ausgangsposition zurück.

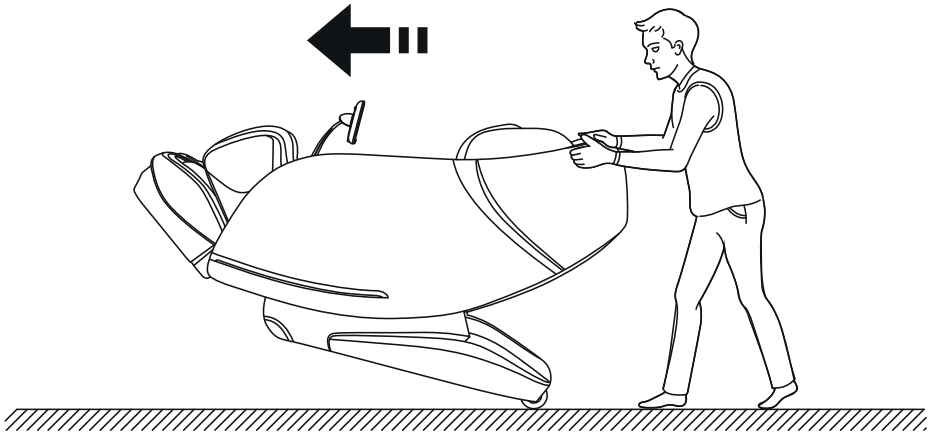

HINWEIS: Vor dem Verschieben müssen Sie zuerst das Gerät ausschalten und dann das Netzkabel sowie das Verbindungskabel abziehen.

HINWEIS: Den Sessel bitte mit mindestens zwei Personen bewegen. Die zweite Person kann den Sessel von vorne anheben, um ihn auf die Rollen zu positionieren.

Reinigung | Pflege | Lagerung

A| REINIGEN DES KUNSTLEDERS

Das Kunstleder mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Bitte nicht mit Lösungen reinigen, die Chemikalien wie Verdünnungsmittel, Benzin und Alkohol enthalten. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsmittel das Kunstleder nicht beschädigt. Bitte lesen Sie die Anwendungshinweise des Reinigers aufmerksam. Wenn das Kunstleder stark verschmutzt ist, reinigen Sie es wie folgt:

1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit heißem Wasser oder einem handelsüblichen neutralem Waschmittel und wringen Sie es aus.
 2. Vergewissern Sie sich, dass das Tuch gut ausgewrungen ist.
 3. Reinigen Sie die Oberfläche des Kunstleders mit dem Tuch.
 4. Achten Sie darauf, dass Sie das Tuch beim Abwischen mehrmals ausspülen.
 5. Lassen Sie das Kunstleder auf natürliche Weise trocknen. Nicht mit dem Haartrockner trocknen.
- Die Oberfläche des Kunstleders kann bei Verwendung eines ungeeigneten Reinigungsmittels verblassen oder verfärben. Testen Sie die Reinigungslösung in einem kleinen Abschnitt, bevor Sie sie vollständig auftragen.
 - Die Reinigung des Kunstleders mit Alkohol, Verdüner oder benzinhaltigen Mitteln, kann zu Verfärbungen oder zum Abtragen der Farbe insgesamt führen.

B| DIE REINIGUNG VON PLASTIKTEILEN

1. Ein weiches Tuch in warmes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel geben, gut auswringen und die Plastikteile abwischen.
2. Reinigen Sie die Plastikteile nicht mit Chemikalien wie Verdünnern, Benzin und Alkohol.
3. Mit einem in sauberem Wasser ausgewrungenen Mikrofasertuch oder weichen Tuch abwischen.
4. Die Plastikteile an der Luft trocknen lassen.

C| LAGERUNG

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, dann sollte das Stromkabel aufgewickelt werden und das Gerät sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät niemals bei hoher Temperatur oder in der Nähe von offenem Feuer auf, vermeiden Sie eine langfristige Aussetzung unter Sonnenlicht.
- Verwenden Sie bei der Reinigung bitte nur handelsübliche Kunstlederpflege. Reinigen Sie es zu keiner Zeit mit Verdüner, Benzol oder Alkohol.
- Steht das Gerät auf einer ungeraden Fläche, dann rollen oder schieben Sie es nicht; heben Sie es, um es zu bewegen.
- Bitte machen Sie nach der Benutzung Pausen und benutzen Sie das Gerät nicht mehrere Male ohne Unterbrechung hintereinander.

Störungssuche

STÖRUNG

- Bei Betrieb ertönt das Geräusch des Motors.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig
- Das Gerät stellt den Betrieb ein.
- braintronics®-Programme lassen sich nicht starten.

ERKLÄRUNG

- Es ist ein normales Betriebsgeräusch.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in die Steckdose gesteckt und dass der Stromschalter angeschaltet wurde. Überprüfen Sie das Kabel der Fernbedienung.
- Nach Erreichen der voreingestellten Laufzeit oder nach zu langer Nutzungsdauer schaltet sich der Sessel automatisch ab. So wird die längere Lebensdauer des Sessels gesichert.
- Vergewissern Sie sich, dass die braintronics®-App installiert und Ihr Konto aktiviert ist. Kontrollieren Sie außerdem, ob eine Bluetooth®-Verbindung zwischen Smartphone und Massagesessel besteht.

Technische Daten

Maße:	aufrecht: 80x148x120 cm liegend: 80x180x105 cm
Gewicht:	141 kg
Spannung:	220-240V ~ 50/60Hz
Nennleistung:	220 W
Laufzeit:	20 Minuten
braintronics:	21 Minuten
Zertifikate:	



EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsvorgang einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright © 2019 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.